

欢迎

结肠癌 筛查

如此简单

适应症

Cologuard® 用于定性检测人类粪便中与结直肠肿瘤相关的 DNA 标志物以及隐匿性血红蛋白的存在。检测结果若为阳性，则表示检测对象可能患有结直肠癌 (CRC) 或晚期腺瘤 (AA)，后续应接着进行诊断性结肠镜检查。Cologuard 专为 45 岁以上的成年人（无论性别）进行 CRC 筛查，这一年龄段的人群是 CRC 的一般风险群体。Cologuard 不可作为适用于高风险患者的诊断性结肠镜检查或监测性结肠镜检查的替代方案。


禁忌症

Cologuard 专用于 45 岁以上的一般风险患者，他们是 CRC 的典型群体。对于以下类型的患者，Cologuard 尚未经过临床试验：

- 有结直肠癌、腺瘤或其他相关癌症病史的患者。
- 在过去 6 个月内，经其他结直肠癌筛查方法检测，结果为阳性的患者。
- 被确诊患有易导致结直肠癌的疾病的患者。其中包括但不限于：
 - 炎症性肠病 (IBD)
 - 慢性溃疡性结肠炎 (CUC)
 - 克罗恩病
 - 家族性腺瘤息肉症 (FAP)
 - 结直肠癌家族史
- 被确诊患有相关的家族性（遗传性）癌症综合征的患者，如遗传性非息肉病性结直肠癌综合征（HNPCCC 或 Lynch 综合征）、黑斑息肉综合征、MYH 相关性息肉病 (MAP)、加德纳氏综合征、透克氏症（或克雷尔综合征）、考登综合征、幼年性息肉病、多发性消化道息肉综合征、神经纤维瘤病或家族增生性息肉病。

警告与注意事项

- 横断面研究（即单时间点）已证明 Cologuard 的效果。目前尚未针对 Cologuard 的计划效果（即于一段期间内重复检测的好处和风险）进行研究。此外，对于先前已接受过 Cologuard 检测的成人，也未评估其接受 Cologuard 检测的效果。未针对 Cologuard 计划灵敏度的非劣效性或优越性与其他建议的 CRC 和 AA 筛查方式进行比较。
- 临床验证研究在 50 岁以上的患者中进行。ACS 指南建议在 45 岁开始进行筛查。Cologuard 在 45 至 49 岁患者中的效果由近龄组的子组分析进行评估。
- 对于 75 岁以上的人群，CRC 筛查指南建议有所不同。75 岁以上的人群应根据个人的健康状况并结合健康护理提供者的建议，来决定是否进行筛查。老年患者的 Cologuard 检测结果应慎重解读，因为假阳性结果的比率会随着年龄的增长而升高。
- Cologuard 检测结果为阴性并不能保证未患有癌症或晚期腺瘤。Cologuard 检测结果为阴性的患者，应该继续参与以其他建议的筛查方式进行的结直肠癌筛查计划。该项后续筛查的间隔时间尚未明确。
- Cologuard 可能会产生假阴性或假阳性结果。当 Cologuard 的检测结果为阳性，但通过结肠镜检查并未发现癌症或癌前息肉时，即为产生了假阳性结果。当 Cologuard 并未检测到癌前息肉或结直肠癌，但结肠镜检查的结果为阳性时，即为产生了假阴性结果。
- 患者腹泻时或者其尿液或粪便中含血时（例如患有出血性痔疮、手上有正在流血的切口或伤口、直肠出血或月经期间），切勿采集供 Cologuard 检测使用的样本。
- 为确保样本的完整性，实验室必须在样本采集后 72 小时内收到患者的样本。患者应根据《Cologuard 患者指南》中的说明，将粪便样本送达实验室。
- 患者应知悉《Cologuard 患者指南》中列出的警告事项。切勿饮用防腐液。
- 使用 Cologuard 取样试剂盒的风险极低，临床试验未发现严重的不良反应报告。患者在打开和盖上盖子时要小心，以免手扭伤。

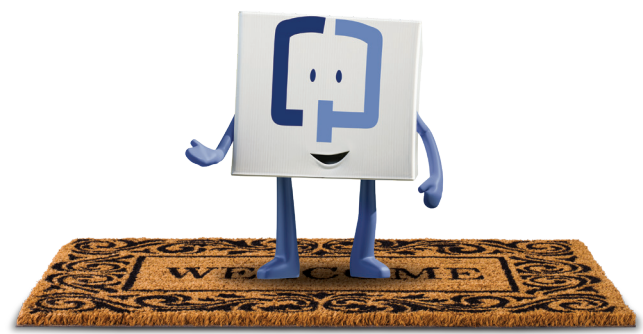

我们开始吧

感谢您选择 Cologuard® 筛查
结直肠癌。本指南提供以下信息：

- 各个环节有多简单方便：获取。使用。送检。
- 关于结果
- 关于保险

需要帮助？

请致电我们的客户关怀中心：1-844-870-8870 或者
访问 CologuardTest.com/use 观看使用方法介绍视频。



获取

好消息！Cologuard 即将发货。

在您的健康护理提供者将已完成的订单寄给我们后，我们会直接将 Cologuard 取样试剂盒发送给您！您还会接到一通客服电话，供您了解采集和寄回样本的更多信息。

如需了解更多相关信息，请访问
CologuardTest.com/whatsnext。

需要帮助？

请致电我们的客户关怀中心：1-844-870-8870 或者
访问 CologuardTest.com/use 观看使用方法介绍视频。



使用

取样非常简单。这里有一些小窍门！



无需特殊准备。无需请假。无需改变饮食和用药。



在家中即可私密取样（样本不应大于试剂盒中的液体瓶）。如果您有腹泻或者尿液或粪便中含血（例如患有出血性痔疮、手上有正在流血的切口或伤口、直肠出血或月经期间），则不应提供样本。



您需使用收到的盒子将样本寄回。多么干净方便，对吧？内袋有助于防止泄漏，**所以请不要移除内袋，因为内袋是粘住的。**




请根据试剂盒中的详细说明，在取样后24小时内寄回样本。由于周末邮件可能会延迟递送，我们建议您在星期一至星期四的某个时间采集并寄送样本。



试剂盒中附有详细的《Cologuard® 患者指南》，其中列明了详细步骤。如果您更倾向于观看使用方法介绍视频，那您太幸运了！**访问 CologuardTest.com/use 即可观看。**

需要帮助？

请致电我们的客户关怀中心：**1-844-870-8870** 或者访问 **CologuardTest.com/use** 观看使用方法介绍视频。

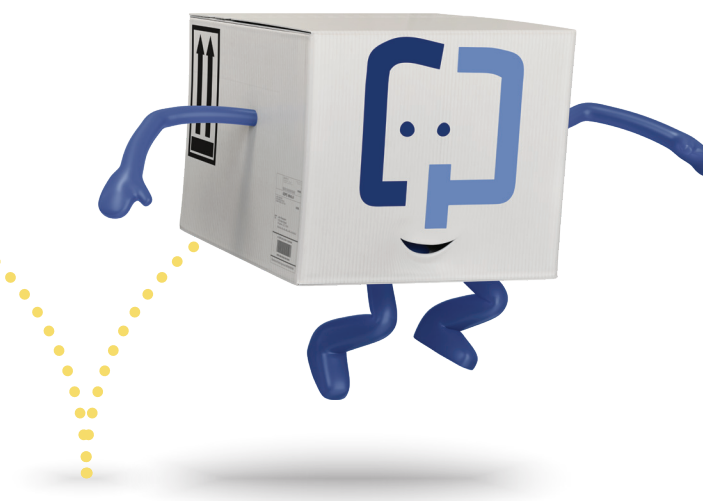

送检

请于 24 小时内寄回样本！遵循以下简单步骤即可。

1

填写标签

请务必按照正如运输标签上注明的您的姓名书写姓名。请务必写下您的出生日期、取样的日期和时间。准确的标签信息有助于我们的实验室团队尽快交付结果。

2

贴好标签

填好标签后，将其牢牢贴在样品容器盖和试管上。

3

寄送样本

将贴好标签的样本放在盒中。盒上已贴有运输标签。您可以从任何联合包裹服务公司 (UPS) 收件地点投递，或者访问 cologuardtest.com/pickupmykit 或致电 1-800-PICKUPS 预约取件。
您无需支付运输费用！

需要帮助？

请致电我们的客户关怀中心：1-844-870-8870 或者访问 CologuardTest.com/use 观看使用方法介绍视频。

了解您的结果

收到您的试剂盒后，我们的实验室将立即检测您的样本，通常会在两周内得出结果。我们会将结果送达至您的健康护理提供者，他们会尽快跟进结果并与您讨论。但现在，我们可提供简要的预期概述。

阳性结果

- “阳性”结果表示在检测中发现了可能由结肠癌前病变或结肠癌导致的异常 DNA 细胞和/或异常血细胞。
- 只要出现“阳性”结果就应做进一步的结肠镜检查。
- 假阳性结果的确也会发生。当 Cologuard 的检测结果为阳性，但通过结肠镜检查并未发现癌症或癌前息肉时，即为产生了假阳性结果。

阴性结果

- “阴性”结果表示没有检测到由结肠癌前病变或结肠癌导致的异常 DNA 细胞和/或异常血细胞。
- 计划在您的健康护理提供者推荐的时间再次接受筛查。美国癌症协会 (American Cancer Society) 建议在检测出现阴性结果后每 3 年重复进行一次 Cologuard 检测。
- 假阴性结果的确也会发生。当 Cologuard 并未检测到癌前息肉或结直肠癌，但结肠镜检查的结果为阳性时，即为产生了假阴性结果。

需要帮助？

请致电我们的客户关怀中心：1-844-870-8870 或者访问 CologuardTest.com/use 观看使用方法介绍视频。

我们为您给付

Cologuard 在 Medicare 和大多数主要保险公司的给付范围内。

Cologuard 在 Medicare 和 Medicare Advantage 给付范围内，符合条件的 50-85 岁患者无需支付共付额或扣减额。

全国范围内 94% 以上的 Cologuard 患者没有自付筛查费用。

- 根据《平价医疗法案》(Affordable Care Act)，Cologuard 应在大多数私人保险公司的给付范围内，符合条件的患者（年龄为 50-75 岁；具有结肠癌一般风险；没有症状）无需支付共付额或扣减额。

当前，约 74% 的 45-49 岁 Cologuard 患者没有自付筛查费用。

- 许多国家和地区付款人已在 45 岁开始支付 CRC 筛查费用。
Exact Sciences 继续与付款人合作，扩大 45-49 岁患者的给付和承保范围。

患者支持


可能有给付范围例外情况；只有您的保险公司可以确认如何为您给付 Cologuard。我们的专家团队可以帮助您联系保险公司并提出适当问题，请致电 1-844-870-8870 与我们联系。

Exact Sciences 根据截至 2019 年 10 月 1 日的历史患者账单进行评估。给付费率根据州和地区而异。可能有给付范围例外情况，只有您的保险公司可以确认如何为您给付 Cologuard。


前往 Cologuardtest.com/insurance 了解更多信息。

需要帮助？

请致电我们的客户关怀中心：1-844-870-8870 或者
访问 CologuardTest.com/use 观看使用方法介绍视频。

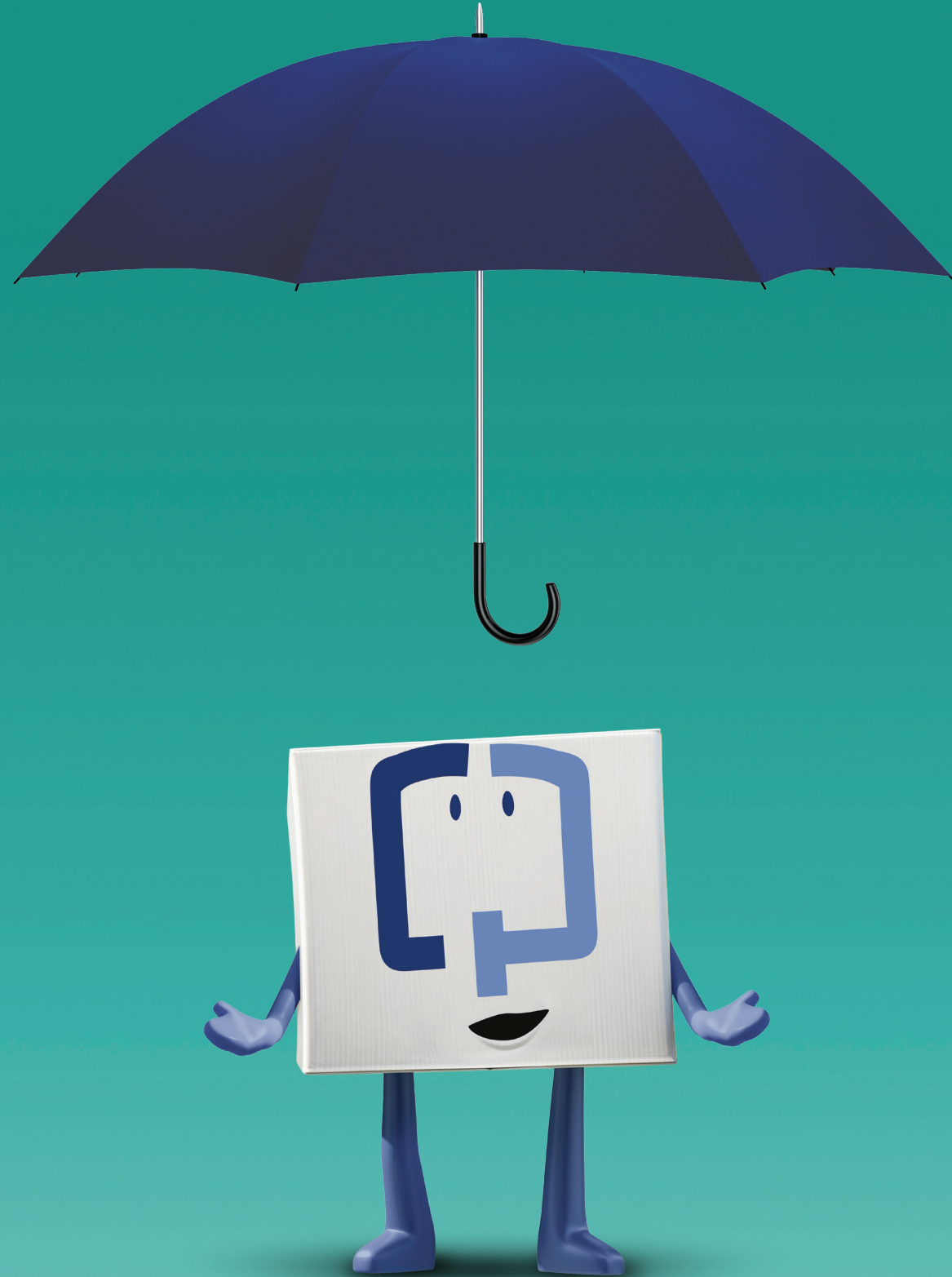

正确筛查 小贴士!

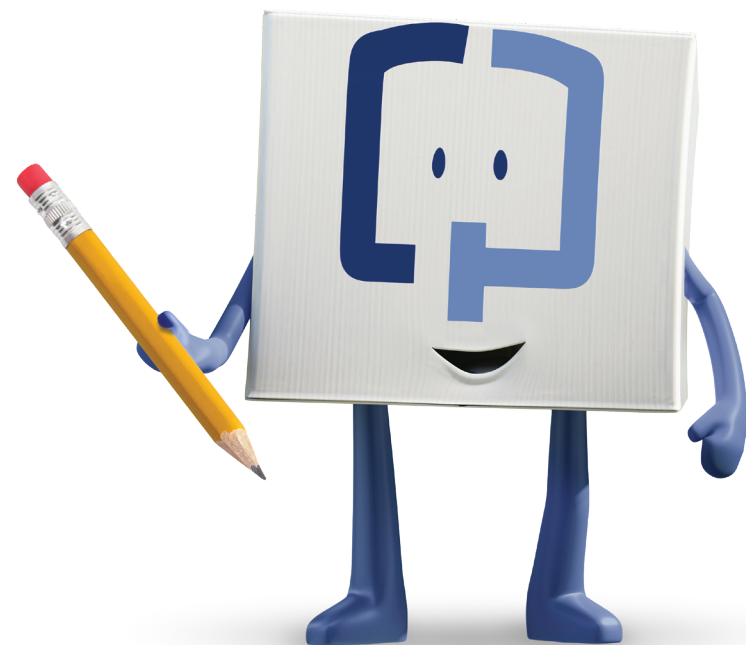


利用此磁铁写下重要日期，
在取样后 24 小时内寄出。

需要帮助?

请致电我们的客户关怀中心：1-844-870-8870 或者
访问 CologuardTest.com/use 观看使用方法介绍视频。

再见!

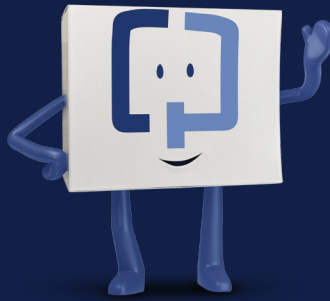

EXACT SCIENCES CORPORATION
441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com

1-844-870-8870

Cologuard 是 Exact Sciences Corporation 的注册商标。
©2019 Exact Sciences Corporation。保留所有权利。US.CG.1560-2019 年 10 月 3 日

更多有用信息，请访问 CologuardTest.com



**EXACT
SCIENCES**